



Applicateur de film à 4 ouvertures - Baker

VF2145 VF2146 VF2147 VF1510 VF1500 VF1501 VF1502 VF1515


**Fiche
technique**

Description :

Applicateur de film cylindrique avec 4 côtés d'application, avec 4 épaisseurs différentes prédéfinies. Les applicateurs Baker sont disponibles en largeur de film de 60 mm et de 80 mm. Ils sont adaptés pour l'application de nombreux produits sur des supports plats et relativement rigides. Comme ils sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité, ils ne sont pas altérés par des produits acides ou alcalins.

Conforme à :

ASTM D 3022 ASTM D 823

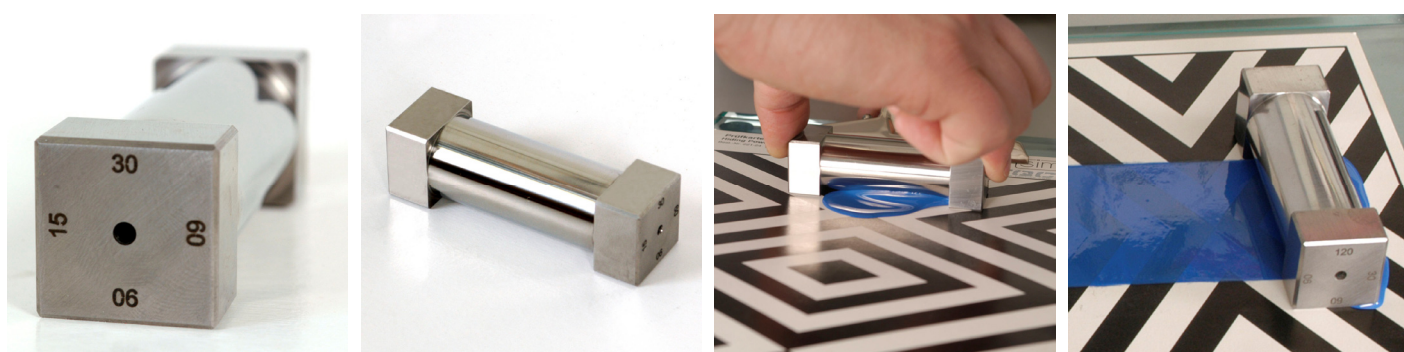


Livraison :

Livré dans un étui de protection en plastique. Une table d'application en verre est disponible en option.

Emploi :

Sélectionner l'ouverture appropriée et placer l'applicateur sur une surface plane, par exemple une plaque de verre. Placer l'échantillon de produit à appliquer au centre de l'applicateur, près de l'ouverture choisie. Tirer l'applicateur sur la surface.

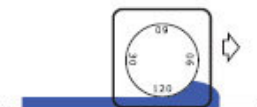

Pour des raisons physiques, l'épaisseur de film humide déposée n'est pas égale à l'ouverture choisie de l'applicateur. L'épaisseur de film humide déposée peut varier de 40 % à 80 % de l'ouverture choisie de l'applicateur.

Dû à l'évaporation du solvant ou de l'eau, l'épaisseur de film sec sera inférieure à l'épaisseur de film humide.

Données

techniques :

Matériau : Acier inoxydable de haute qualité
Précision : mieux que 3 microns
Dimensions extérieures : 100 x 22 x 22 mm / 120 x 22 x 22 mm

VF2145 Applicateur de film Baker largeur 60 mm, avec 4 ouvertures 15/ 30/ 60/90µm
VF2146 Applicateur de film Baker largeur 60 mm, avec 4 ouvertures 30/ 60/ 90/ 120µm
VF2147 Applicateur de film Baker largeur 60 mm, avec 4 ouvertures 50/ 100/ 150/ 200µm
VF1510 Applicateur de film Baker largeur 60 mm, avec 4 ouvertures au choix (délai plus long)
VF1500 Applicateur de film Baker largeur 80 mm, avec 4 ouvertures 15/30/60/90µm
VF1501 Applicateur de film Baker largeur 80 mm, avec 4 ouvertures 30/60/90/120µm
VF1502 Applicateur de film Baker largeur 80 mm, avec 4 ouvertures 50/100/150/200µm
VF1515 Applicateur de film Baker largeur 80 mm, avec 4 ouvertures au choix (délai plus long)



**Attention
particulière :**

Nettoyer immédiatement après usage à l'aide de solvant ou d'eau. Ne jamais utiliser de substances abrasives pour le nettoyage. Traiter les applicateurs avec soin et attention.

**Clause de non-
responsabilité :**

Les informations fournies dans cette fiche ne sont pas exhaustives et toute personne utilisant le produit à d'autres fins que celles recommandées dans la présente fiche doit obtenir une autorisation écrite préalable du fabricant compte-tenu des risques potentiels. Les informations contenues dans cette fiche sont correctes mais nous n'avons aucun contrôle sur la qualité ou l'état du produit ou les facteurs affectant l'utilisation du produit. Par conséquent, sauf accord écrit, nous n'acceptons aucune responsabilité relative à l'utilisation de ce produit dans tout autre cadre que celui défini ou toute perte ou dommage résultant de son utilisation autre que celle résultant d'un défaut de fabrication. Les informations contenues dans cette fiche sont susceptibles d'être modifiées selon l'expérience et la politique de développement continu des produits du fabricant.